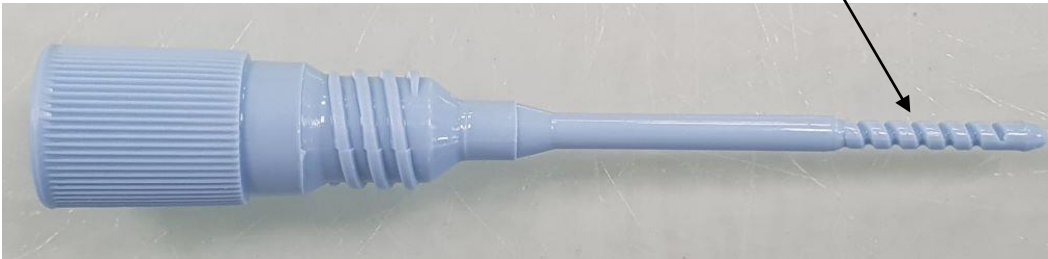


Fiche à remettre au laboratoire avec les échantillons

NOM :PRENOM :DATE DE NAISSANCE :

Préconisations de recueil	
SANG DANS LES SELLES	
<p>Fournir au patient le nombre de seringue Hem Sign 4 et de flacon nécessaire en fonction de la prescription.</p> <p><u>Recommandations générales :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Respecter les 3 jours consécutifs si recherche multiple. • Utiliser de préférence des selles solides. (En cas de selles liquides, conserver le flacon d'origine, conservé à +4°C, et le ramener au laboratoire). • Eviter les prélèvements dans tous les cas de saignements, en particulier provoqués par la constipation, les hémorroïdes ou l'administration de médicaments par voie rectale. • Périodes de règles : pas de prélèvement 3 jours avant, pendant et 3 jours après les règles. <p>Pas de régime alimentaire spécifique (L'ingestion de viande ne fausse pas le test qui est spécifique de l'hémoglobine humaine).</p> <p>Pour effectuer le recueil :</p> <p>Réaliser le recueil dans le flacon bouchon rouge fournit par le laboratoire.</p> <p>ATTENTION les selles doivent être recueillies exclusivement à l'aide du batonnet bleu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dévisser le batonnet bleu, le sortir de la seringue. • Maintenir vertical ce batonnet bleu et piquer dans les selles à 3 endroits différents la partie torsadée du batonnet et uniquement la partie torsadée (photo ci-dessous). <p>ATTENTION : NE PAS TROP CHARGER LE BATONNET.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remettre le batonnet dans la seringue et la boucher. 	
	
<p>Identifiez les échantillons avec vos nom, prénom et date de naissance</p> <p>Merci de renseigner les informations ci-dessous</p> <p>Date / heure du recueil</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Température de conservation avant dépose :</p> <p><input type="checkbox"/> ambiante</p> <p><input type="checkbox"/> réfrigérée</p> <p><input type="checkbox"/> Explorations récentes type coloscopie ou biopsie transrectale :</p> <p><input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON</p> <p>Si oui Préciser + date :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

Conditions de conservation et d'acheminement au laboratoire

	Température ambiante (20-25°C)	Température réfrigérée (2-8°C)
Seringue Hem Sign 4	Seringue à déposer au laboratoire dans les 4 jours	Seringue à déposer au laboratoire dans les 7 jours
Flacon	Aucune conservation possible du flacon à température ambiante	Flacon à déposer au laboratoire dans les < 72 h